


# HIPPOCAMPE®



## Hippocampe Piscina

Instrucciones de instalación y uso

Talla única 0002-TS-02-BU

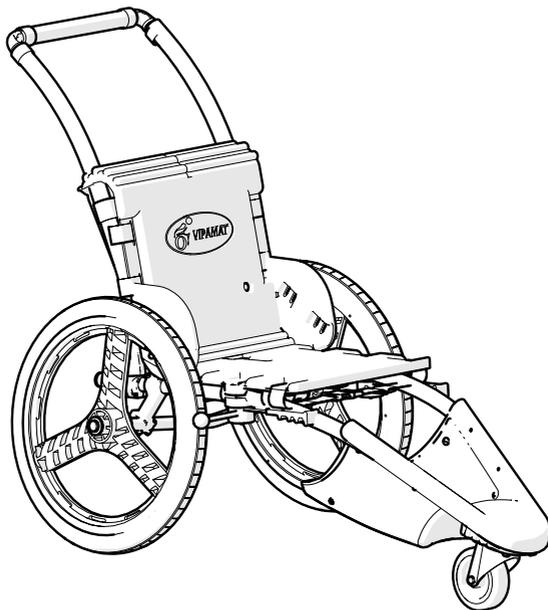


VIPAMAT  
3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)  
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81  
[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)

**Felicidades !** Acaba de comprar la Hippocampe Piscina de Vipamat. La Hippocampe será su compañera tanto en piscinas privadas como públicas. Le permitirá acceder a todas las zonas acuáticas: vestuarios, lavapiés, estanques y zonas de piscina.

## Contenido

<b>1 Descubra su Hippocampe Piscina</b> .....	p2
<b>2 Información legal y de seguridad</b> .....	p4
2.1 Precauciones de seguridad y utilización.....	p4
2.2 Declaración de conformidad y condiciones de garantía.....	p5
2.3 Mantenimiento y reparación.....	p5
<b>3 Montaje del Hippocampe Piscina</b> .....	p7
3.1 Instalación del par de ruedas grises.....	p7
3.3 Instalación de la barra de empuje.....	p9
3.2 Montaje del asiento.....	p11
3.3 Instalación del cinturón ventral.....	p13
<b>4 Instrucciones de uso</b> .....	p15
4.1 Uso de los frenos de parking.....	p15

## 1 Descubra su Hippocampe Piscina

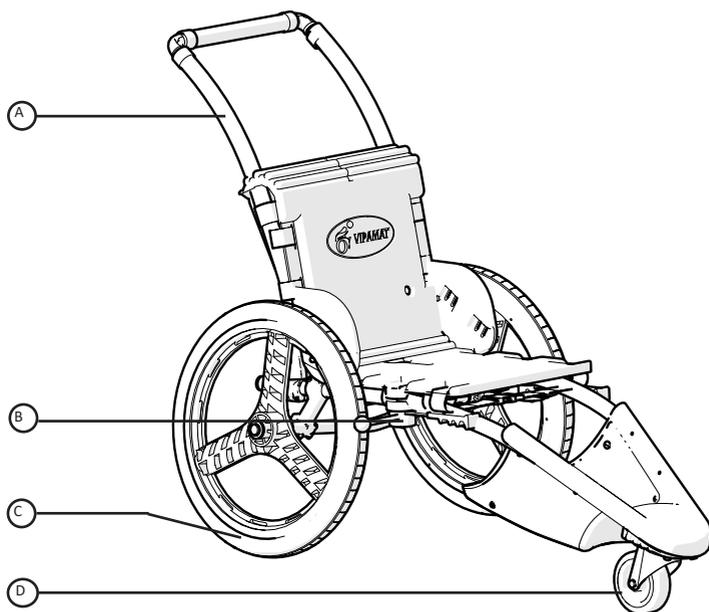

La silla de ruedas Hippocampe está disponible en talla única, con cinturón opcional.

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Barra de empuje      | <b>B</b> Frenos de parking         |
| <b>C</b> Par de ruedas grises | <b>D</b> Rueda delantera giratoria |

## IMPORTANTE

Conserve estas instrucciones en un lugar seguro.

**Es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones y consejos de este documento.**

---

Las opciones disponibles en Hippocampe Piscina :



Cinturón ventral

## 2 Información legal y de seguridad

### 2.1 Precauciones de seguridad y utilización

1. Es imprescindible respetar estrictamente las recomendaciones y consejos de este documento.



La Hippocampe Piscina es una silla de piscina que sólo debe utilizarse en este entorno. No está diseñada para su uso en exteriores.

2 - Esta silla de ruedas ha sido diseñada para facilitar el acceso a la piscina.

3. Antes de cada uso de la silla de ruedas, asegúrese de que las ruedas y la barra de empuje están correctamente encajadas presionando hacia abajo cada clip y comprobando que han salido de los conectores.

4. Compruebe que todas las hebillas del asiento están bloqueadas. Las correas deben estar correctamente tensadas y las hebillas cerradas.

5. El Hippocampe Piscina puede utilizarse solo o acompañado.

6. Siempre que se utilice el Hippocampe, se recomienda encarecidamente la presencia de un acompañante capaz de dirigir, empujar y sujetar la silla de ruedas.

7. Por razones de seguridad, el usuario debe sentarse en la parte posterior del asiento, con la espalda apoyada en el respaldo.

8. Al igual que con una silla de ruedas normal, es necesario acostumbrarse al Hippocampe. Pueden ser necesarias algunas operaciones de prueba para asegurarse de que el Hippocampe se utiliza correctamente.

9. El Hippocampe debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto si el usuario es un niño.

10. El Hippocampe ha sido diseñado para acomodar a una sola persona con un peso máximo de 130 kg.

11. Está prohibido que más de una persona monte en el Hippocampe o se suba a él.

12. Proceda con precaución en terrenos inclinados. Es aconsejable ir acompañado en estos casos.

13. No utilice el Hippocampe para salvar obstáculos superiores a 20 cm.

14. Por razones de seguridad, no utilice el Hippocampe si el ángulo de la pendiente es superior a 7°.

15. Utilizar los frenos en las transferencias para bloquear las ruedas.

16. No modifique el Hippocampe y no utilice nunca componentes distintos de los suministrados por Vipamat. El Hippocampe no debe utilizarse si algún componente está defectuoso.

17. El asiento y el respaldo del hippocampe cumplen la norma M1. No obstante, el producto debe mantenerse alejado de las llamas.

18. Para evitar cualquier riesgo de sobrecalentamiento y lesiones, no utilice las manos para frenar cuando la silla de ruedas esté en una pendiente.

19. El Hippocampe no debe utilizarse si una rueda está pinchada o desinflada.

20. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro del Hippocampe, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vipamat en el número 02 97 86 24 87 o por correo electrónico en la dirección [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com).

#### **Precauciones de seguridad para nadar :**

21. El Hippocampe permite entrar en el agua hasta la altura del asiento y nadar. No está diseñado para flotar con el usuario encima. El Hippocampe no puede considerarse una embarcación.

22. Estar siempre acompañado por un adulto al entrar y trasladarse al agua y durante todo el periodo de baño.

23. El Hippocampe debe utilizarse siempre en una zona de baño supervisada.

24. Si utiliza un cinturón al entrar en el agua y nadar, deberá estar acompañado y supervisado más estrechamente.

## 2.2 Declaración de conformidad y condiciones de garantía

Vipamat como fabricante declara que el dispositivo Hippocampe Piscina clase 1 (clasificación europea) y clase 2 (clasificación USA) y sus accesorios de productos sanitarios cumplen con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo y cumplen con las disposiciones aplicables de la Directiva Europea 93/42/CEE y el Libro II del Código de Salud Pública.

Este producto tiene una garantía de 2 años "piezas y mano de obra" a partir de la fecha de compra (factura como prueba). La garantía consiste en la sustitución de las piezas defectuosas. Esta garantía no se aplica en caso de uso inadecuado y no tiene en cuenta el desgaste de las piezas debido al uso de la silla. Dadas las condiciones de uso de la Hippocampe, su vida útil prevista es de 4 años a partir de la fecha de compra.

El número de serie del producto está grabado en el eje trasero del armazón. El número de serie de la opción cinturón ventral está impreso en la etiqueta del embalaje de la opción.





Para deshacerse de su Hippocampe, llévelo a un centro de recogida de residuos y dépositelo en la categoría de reciclaje correcta.

## 2.3 Mantenimiento y reparación

- La silla de ruedas Hippocampe Piscina está diseñado para resistir el agua de las piscinas. Se compone de piezas de aluminio, plástico y acero inoxidable procedentes de la industria náutica y ciclista.
- El Hippocampe debe aclararse a fondo con agua dulce después de cada uso.
- Vipamat no se hace responsable de los daños causados por negligencia.



La Hippocampe debe enjuagarse sistemáticamente con agua dulce después de cada uso. Sin este mantenimiento regular, los tratamientos de la piscina pueden dañar la estructura.

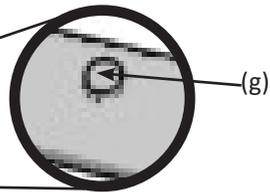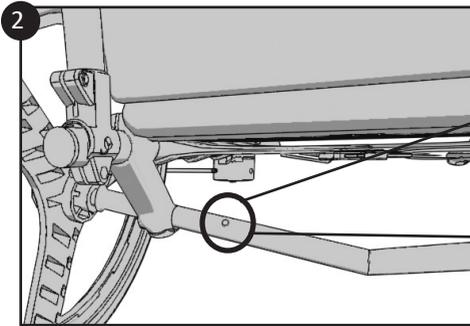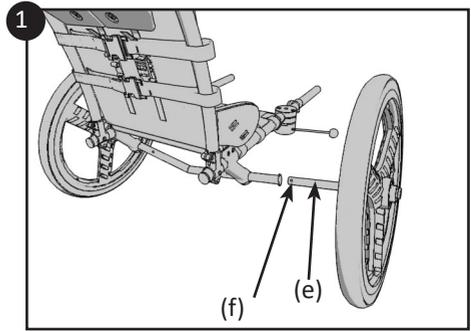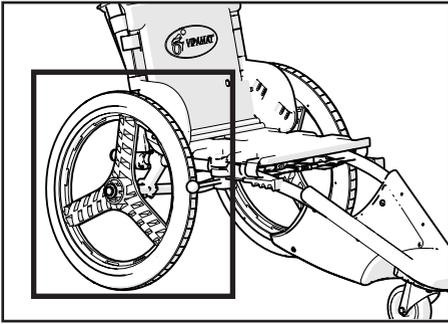

## 3 Montaje del Hippocampe Piscina

### 3.1 Instalación del par de ruedas grises

❶ Instale las 2 mitades de eje en el eje del chasis (e)

Presione el clip (f) e introduzca completamente la mitad del eje de la rueda con la rueda hasta que la rueda esté en contacto con el eje del chasis.




❷ Gire la mitad del eje de la rueda de modo que el clip sobresalga por el orificio del eje del chasis (g).

**Controles:**

- Compruebe que las mitades del eje de las ruedas grises están bloqueadas presionando el clip (f) y comprobando que sale del eje del chasis.



Inflar las ruedas a 1,5 bar.


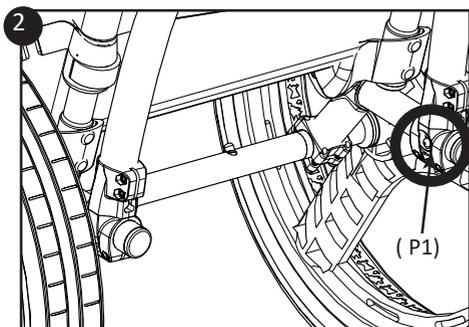
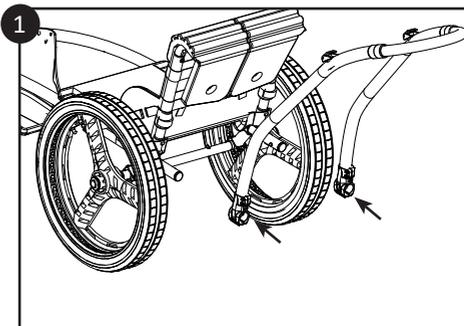
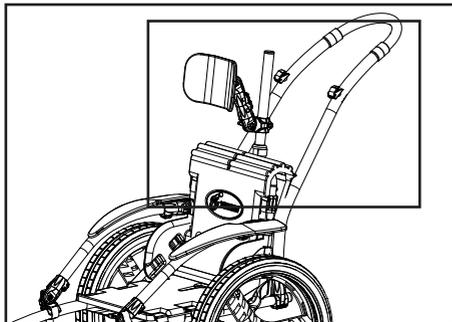


## 3.2 Instalación de la barra de empuje

- ❶ Introduzca los 2 conectores de la barra de empuje en los tubos del bastidor hasta los clips.
- ❷ Apriete los 2 clips para poder insertar los 2 conectores de la barra de empuje más profundamente y empuje los clips hacia fuera a través del agujero en el interior de cada conector. Los 2 clips deben salir de los conectores de la barra de empuje.

### Controles:

- Compruebe que la barra de pulsadores está bloqueada presionando el clip de cada lado y comprobando que sale del conector de la barra de pulsadores (P1).

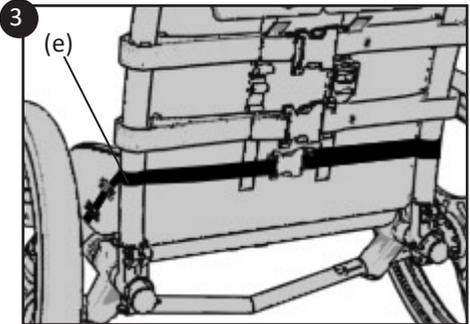
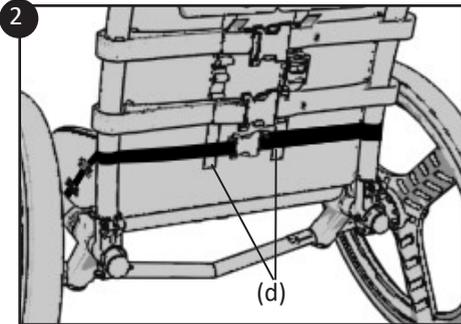
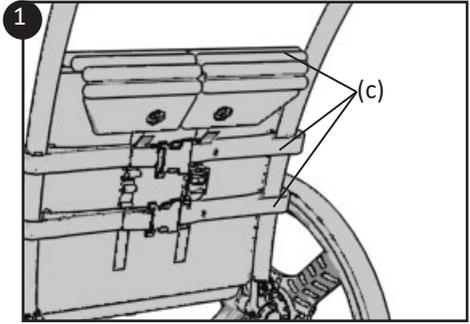
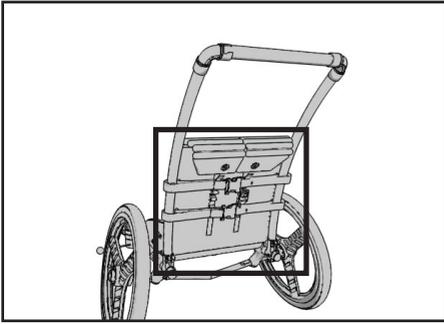


### 3.3 Montaje del asiento

- ❶ Abroche las 3 correas horizontales (c) del respaldo colocando la correa superior del respaldo a la altura deseada y, a continuación, cubra la correa superior del respaldo con la parte superior del respaldo.
- ❷ Tense las 2 correas verticales (d) de la parte superior del respaldo.
- ❸ Pase la correa lateral por los bucles de un lado de la espuma del asiento, luego por debajo del asiento y por los bucles del otro lado del asiento para cerrar el bucle de la correa detrás de los 2 tubos de la barra de empuje.



Antes de cada uso, asegúrate de que las hebillas están cerradas y las correas tensas.

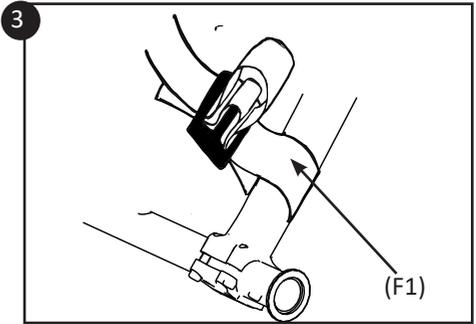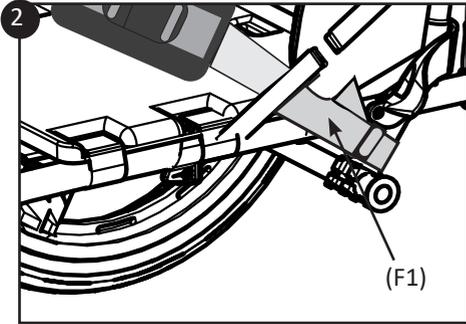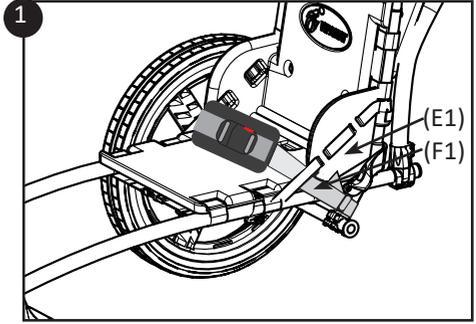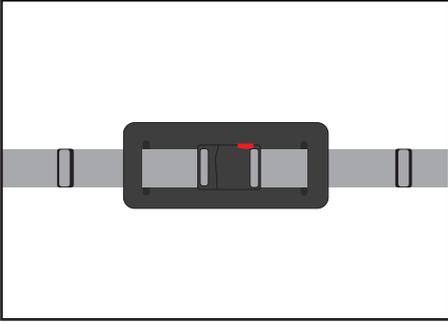


### 3.4 Instalación del cinturón ventral opcional (0024-00-01)

- ❶ Coloque el cinturón en el asiento y pase la correa (F1) por el interior de la pieza (E1).
- ❷ Pase la correa (F1) alrededor del tubo del bastidor desde el exterior hacia el interior.
- ❸ Vuelva a pasar la correa por el bucle, sacándola al menos 2 cm y, a continuación, apriétela.

#### **Controles:**

- Compruebe que la correa está firmemente sujeta al chasis del Hippocampe.

*El número de serie del cinturón ventral se encuentra en la etiqueta del embalaje del producto.*

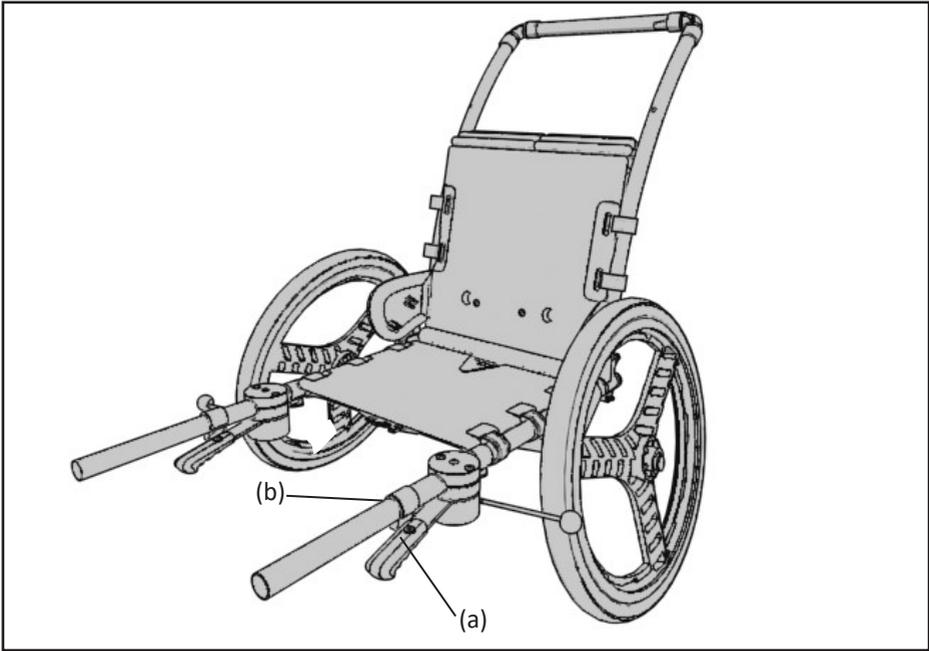

## **4. Instrucciones de uso**

### **4.1 Uso de los frenos de parking**

❶ Utilice los frenos durante la transferencia para bloquear las ruedas. La varilla de acero inoxidable debe bloquear las ruedas y la barra de polietileno (a) debe calzarse con la cornamusa (b).

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Dispositivo médico (Medical Device)		Número de modelo
	Lea las instrucciones antes de usarlas		Número de serie
	Marca CE		Peso máximo del usuario
	Atención		Fecha de fabricación
	No tirar a la basura doméstica		Sin látex
	Fabricante		

Etiqueta de identificación :

La etiqueta de identificación está fijada al armazón de la silla de ruedas.

A continuación se muestra un ejemplo de etiqueta.

	VIPAMAT (www.vipamat.com)	Made in France	
	3 rue Gustave Eiffel		
	56270 PLOEMEUR France		
	+33-297 862 487(Outside USA)		
	832848533(USA)		
<b>FAUTEUIL HIPPOCAMPE PISCINE</b>			
<b>SWIMMING-POOL WHEELCHAIR HIPPOCAMPE</b>			
<b>Ref</b>	<b>0002-TS-02-BU</b>	<b>Size TS</b>	<b>Qt 1</b>
<b>SN</b>	<b>000000</b>	<b>LOT 900000</b>	<b>286 Lbs</b>
			<b>130 Kg</b>
<b>(01)03664560000084(10)900000(21)000000</b>			

Número UDI (identificador único de dispositivo)

---

Encuentre nuestro canal de tutoriales en **Youtube**  
y siga nuestras noticias en **Facebook** e **Instagram**.



Vipamat



Vipamat  
World



Vipamat







ES

Hippocampe Piscina



EN12-02-V2-ES\*31/10/2023

ES

VIPAMAT

3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81

[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)